



Mallit 10

Liko Original - nostokangas, mallit 10, 11

Liko Original- nostokangas, jossa on puolikorkea selkäosa ja kankaan ulkopuolella. Liko Original- nostokangas on kääntö- nostokangasta on montaa eri kokoa ja muunnostas- Kuvassa vasemmalla on Original- nostokangas, jossa on vah-



Mallit 30

Liko Komfort - nostokangas, malli 30,31

Komfort- kankaassa istuma-asento on pysty ja selkä on tuettu koko pituudelta. Komfort nostokangas asetetaan ja otetaan pois vuoteesta ja se annetaan olla pyörätuolissa istujan alla.

Perusnostokankaat turvalliseen ja helppoon nostamiseen



Mallit 10

... jossa avustettava voi pitää yhtä kättä tai molem-
... tevä ja helposti puettava ja siinä on mukava istua.
...
... vivistettu selkäosa.



Mallit 00

Liko Yleisnostokangas, malli 00, 02

Yleiskangas on perusmalli, joka sopii useim-
mille avustettaville. Esimerkiksi vanhemmille
avustettaville, joilla on liikerajoituksia. Kan-
gas tukee hyvin koko selkää ja istuma-asento
on pysty.
Malli 02 on sovellutus, jossa nostokorkeutta
tulee jonkin verran lisää.



Mallit 20

Liko Original - nostokangas, korkea selkä, malli 20, 21

Original- nostokangas, korkea selkä nostaa
taakse kallistuneessa asennossa ja tukee
päästä. Kangas sopii henkilöille, joilla on huo-
no vartalon hallinta. Sopii myös erinomaisesti
lattialta nostoihin.



Mallit 35

Liko Komfort – nostokangas, malli 35, 36

Korkeaselkäinen Komfort –nostokankaassa
nostettaessa asento on melko voimakkaasti
taakse kallistunut. Kangas tukee myös päätä.
Komfort- nostokangas asetetaan ja otetaan
pois vuoteesta. Pyörätuolissa kangas jätetään
istujan alle.



Mallit 00

Yleisnostokangas voidaan pukea siten, että
reisivuot menevät toistensa päälle, kumman-
kin reiden ali.



Mallit 22

Liko Silhouette - nostokangas, malli 22

Silhouette nostokangas nostaa taakse kallistu-
neessa asennossa ja tukee hyvin päätä.
Se on suunniteltu muotoiltuihin istuimiin
nostoihin ja istujan alle jätettäväksi. Verkko-
mainen materiaali on hengittävä ja kahvat
ja kovikkeet on jätetty pois, joten se ei paina
istujaa.

WC-nostot

Mallit antavat mahdollisuuden riisua ja pukea housut nosto yhteydessä.



Mallit 40



Mallit 45/46

Liko WC - kangas, malli 40, 45, 46

WC-kangas on yksinkertainen ja helpokäyttöinen ja siinä on WC-noston yhteydessä mahdollista riisua ja pukea housut. WC-kangas sopii henkilöille, joilla on jonkin verran vartalon hallintaa. WC-kankaassa, malli 45, on lisätukea antamassa vyö, joka kiristyy rintakehän ympärille. Malli 46 on WC-kangas, jossa on vyön lisäksi korotettu selkäosa.



Mallit 50



Mallit 55

LikoWC - liivi, malli 50, 55

WC-liivi on suunniteltu turvallisiin ja varmoihin WC-nostoihin henkilöille, joilla on heikko lihastonus. WC-liivi antaa hyvän pystyn istuma-asennon ja samalla pysyvän tuen ylävartalolle samalla, kun se jättää paljon takamusta näkyviin riisumisen ja pukemisen helpottamiseksi. WC-liivissä, malli 55, on korkea selkä/päätuki.

Kertakäyttönostokangas Solo



Solo kertakäyttönostokangas

Vastataksien kysyntään, jossa on toivottu nostokankaita, joita ei tarvitse pestä, on Liko kehittänyt Solo- kertakäyttökankaan, joka voidaan antaa yksittäisen potilaan käyttöön ja hävittää käytön jälkeen. Solo, jossa on korkea selkäosa sopii suurimmalle osalle potilaita ja tavallisimpiin nostotilanteisiin.

Amputaatiopotilaat



Mallit 70

Liko Amputoitujen nostokangas, malli 70, 75

Amputoitujen kangas on erikoismalli, jossa on ohjainlenkit pitämässä reisitet yhdessä. Amputoitujen nostokangas on tarkoitettu korkeille kaksoisamputaatioille tai muille käyttäjille, jotka tarvitsevat lisäturvallisuutta. Amputoitujen kangasta saa hartian korkeudelle ulottuvalla selkätuella sekä korkealla selkätuella, joka tukee myös päätä.

Nostoliivit - tueksi seisomiseen ja kävelyyn



Haararemmit ovat liivien lisävaruste.



Liko Nostoliivi, malli 60 ja 64

Nostoliivi helpottaa ylösnousussa silloin, kun henkilö pystyy varaamaan jalkoihin. Nostoliivi on hyvä apuväline seisomis- ja kuormitusharjoituksissa. WC-käyntien yhteydessä WC-liivistä on apua, koska se jättää koko alavartalon vapaaksi riisumisen ja pukemisen helpottamiseksi. Edestä kiinnitettävä liivi, malli 64, antaa itsenäiselle käyttäjälle mahdollisuuden itse pukea ja kiinnittää liivi. Haararemmit ovat lisävaruste. Remmejä saa sekä lasten että aikuisten kokoa.

Liko Nostohousu, malli 92

Liko nostohousun avulla voi harjoitella kävelyä turvallisesti. Turvallisuus antaa rohkeutta uskaltaa vähän enemmän. Nostohousu antaa vapautta liikkua, kun varaamista on hieman kevennetty. Se nostaa turvallisesti ja sallii avustettavan liikkua vapaasti vailla kaatumisen riskiä.

Kipuherkille



Kipuherkille nostettaville on tarjolla lukuisia malleja, joissa on synteettisestä karvasta tehty lisäpehmuste reisituissa. Pehmusteissa on kovikelevy, jonka voi irrottaa tarvittaessa.

Polyesterverkko – ilmava vaihtoehto



Polyesterverkko on sopiva vaihtoehto silloin, kun nostokangas halutaan jättää istujan alle pyörätuoliin. Materiaali on hengittävä ja kestävä ja malleja lukuisia. Polyestervekkonostokankaita voi käyttää myös suihkun ja kylvyn yhteydessä.

Suihku ja kylpy



Suihku- ja kylpynostoihin on tarjolla useita malleja, jotka on valmistettu muovitetusta verkkomateriaalista. Muoviverkko ei ime vettä itseensä ja siten se ei tunnu kylmältä, vaikka iho olisikin märkä.

Nostokangasvalikoima

Tuotenumero		Ultra nostokangas (suuri kamovuus)	Korotettu yleisnostokangas	Yleisnostokangas	Original-nostokangas	Original-nostokangas	Liko Silhouette - nostokangas, korkeaa selkää	Komfort-nostokangas, WC-aukko	Komfort-nostokangas, WC-aukko	Komfort-nostokangas, korkeaa selkää	WC-kangas, korotettu selkäntuki & ylä	WC-kangas, korotettu selkäntuki & ylä	WC-kangas, korotettu selkäntuki & ylä	WC-kangas, korotettu selkäntuki & ylä	WC-kangas, korotettu selkäntuki & ylä	Edellä kiinnitettyä nostoainia	Amputoitua nostokangas	Amputoitua nostokangas	Sisäamputoitua nostokangas	Solo-käytäntönostokangas	Nostohousu				
35XX---	Mallikuvaus	00	02	06	10	11	20	21	22	30	31	35	36	40	45	46	50	55	60	64	67	70	75	92	
35---2	XXSmall																								
35---3	XSmall																								
35---4	Small																								
35---5	Medium Slim																								
35---5	Medium																								
35---6	Large																								
35---7	XLarge																								
35---8	XXLarge																								
35---14	Short/Lyhyt																								
35---15	Regular/ Vakio																								
35---16	Long/ pitkä																								
35--11-	Nylon/Polyester																								
35--21-	Puuvilla																								
35--31-	Polyesterverkko																								
35--41-	Muovitettu verkko																								
35--12-	Pehmustettu, polyester																								
35--22-	Pehmustettu puuvilla																								
35--32-	Pehmustettu, polyesterverkko																								
35--10-	Nylon/Polyester																								
35--20-	Baumwolle																								
35--30-	Polyesterverkko																								
35--40-	Muovitettu verkko																								
35--60-	Polyesterverkko, ohut																								
WC-nostoihin																									
Sisäänrakennettu päätuki																									
Kertakäyttönostokangas																									

Useimmat nostokankaat ovat Likolla varastotavaraa.

Tilauskokojen toimitusaika on jonkin verran pidempi.

- = varastomalli
- = tilausmalli

Noston lisävarusteet



Seisomaortoosiivi, malli 67

Ortoosiiviä käytetään seisomaan nostoissa henkilöille, joilla on yksilöllisesti tehty ortoosi. Nosto tapahtuu makuulta seisoma-asentoon. Haararemmipari kuuluu tuotteeseen.



Pidennyslenkit

Pidennyslenkeillä voi nopeasti ja yksinkertaisesti tehdä yksilöllisiä sovellutuksia nostokankaisiin. Lenkkejä on kahta pituutta: 12cm ja 22cm ja niillä voidaan jatkaa nostokankaan kiinnityslenkejä.



Lisäpehmuste

Pehmusteita saa erillisinä tuppina, jotka voi vetää nostokankaan reisitukeen. Pehmuste on syntetttistä samaa materiaalia, kuin itse nostokangaskin. Mainitse nostokankaan koko, materiaali ja malli, kun haluat tilata erilliset pehmusteet siihen.



Ristikko nostokaari

Ristikko nostokaarella saa lisää taakse kallistusta nostoasentoon kuin minkä kahden pisteen nostokaari antaa. Siihen sopii suurin osa nostokankaista käytettäväksi. Ristikko nostokaarta on kahta eri mallia.



Stat Repo Original – kääntölakana


Likon Repo-kääntölakana on erinomainen apuväline kääntämiseen ja siirtämiseen vuoteesta ylemmäksi. Repo-kääntölakana asetetaan potilaan alle aluslakanan alle tai sen sijasta.



Liko Scale vaakaa


Digitaalivaaka, jota voi käyttää kaikissa Likon nostimissa ja kaikissa nostokaarissa. Se kiinnitetään nostokaaren yläpuolelle ja on helppokäyttöinen ja helppolukuinen. LikoScale punnitsee 350 kg asti.

Vakionostokaaret

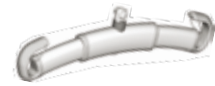

Nostokaari 350

Vakionostokaarta kapeampi – sopii lasten nostamiseen.

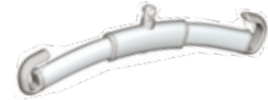


Vakionostokaari 450

Yleismalli, joka sopii kaikkiin tavallisimpiin nostoihin.



Nostokaari 670 Twin

Nostokaari, joka sopii suuremmille nostettaville ja niille, jotka tarvitsevat hartioille lisää tilaa.

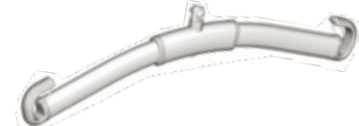

Nostokaari 600

Sopii Komfort nostokankaalla nostettaessa ja silloin, kun molemmat reisituet tukevat reisiä yhdessä.



Sivukaaret

Käytetään silloin, kun halutaan 4-pisteen nosto puoli-istuvassa asennossa. Voidaan yhdistää nostokaariin 450 ja 600.

Lisää noston lisävarusteista Likon kotisivulla www.liko.se



Liko

www.liko.se

Manufactured by

Liko AB

Nedre vägen 100

SE-975 92 Luleå, Sweden

info@liko.se

Maahantuonti ja markkinointi

Oy Trehab Ab

Läntinen teollisuuskatu 11

02920 Espoo

puh. 09-8946550

fax. 09-785448

trehab@trehab.fi

www.trehab.fi

Nostokankaat ja lisävarusteet



Lifts with care



Liko Noston lisävarusteet

Kaikki alkoi yhdestä täysin tekstiilistä valmistetusta nostoliinasta. Pienehkö vallankumous sai alkunsa siitä. Tänä päivänä Likolla on maailman laajuisesti laajin nostokangas- ja nostolisävarustevalikoima. Yhdessä monien nostokaarivaihtoehtojen kanssa antaa nostokangasvalikoima mahdollisuuden suorittaa kaikki potilasnostot.

Liko on yli 25 vuotta ja ollut tiiviissä yhteistyössä avustajien ja avustettavien kanssa ja kehittänyt toiminnallisia ja helppokäyttöisiä noston lisävarusteita. Tietotaito ja tarve lisääntyy alalla koko ajan ja sen myötä jatkuu myös Likon kehittämistyö.

Monia malleja

Kaikilla malleilla on ainutkertaisia ominaisuuksia, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Osaa malleista kutsutaan perusmalleiksi siksi, että ne täyttävät suurimman osan nostotilanteista. Muut mallit ovat enemmän erikoistuneita ja täyttävät kapeamman sektorin nostotarpeita.

Yksilöllinen sovittaminen

Parhaimman mahdollisen mukavuuden ja suurimman turvallisuuden takaamiseksi on nostokankaat aina sovittava yksilöllisesti.

Koot

Oikean koon valitseminen varmistaa parhaan mukavuuden ja turvallisuuden sekä toiminnallisuuden. Kaikissa malleissa on suuri kokovalikoima, joka on luettavissa mallitaulukosta.

Käyttöohje

Jokaisen nostokankaan mukana tulee käyttöohje, Kaikkien, jotka käyttävät nostokankaita, tulee tutustua käyttöohjeeseen. Käyttöohjeessa annetaan neuvoja myös oikean nostokaaren valintaan.

Merkinnät

Nostokankaaseen on kiinnitetty etiketti, josta nostokankaan malli ja koko on luettavissa. Etiketissä on myöskin pesuohje ja suurin sallittu kuorma.

Tarkistaminen

Nostokangas on kulutustavaraa, jolla on rajoitettu elinikä. Käyttö ja pesu kuluttaa kankaan materiaalia ja ompelaita.

Kaikki noston lisävarusteet tulee tarkastaa säännöllisesti. Älä käytä rispaantuneita nostokankaita! Likon nostokankaat on testattu valtuutetulla testilaitoksella ja ne täyttävät MDD I luokan välineille asetetut vaatimukset, samoin EN ISO 10535 harmonisoidun standardin mukaiset vaatimukset.